

Unterregister Ereignisse

Im Unterregister *Ereignisse* werden alle Funktions- und Betriebsstörungen eines *Gerätes* gespeichert. Bereits gespeicherte *Ereignisse* werden über das *rechte Maustastenmenü* angezeigt oder *gelöscht*. *Neue Ereignisse* werden ebenfalls über das *rechte Maustastenmenü* erstellt.

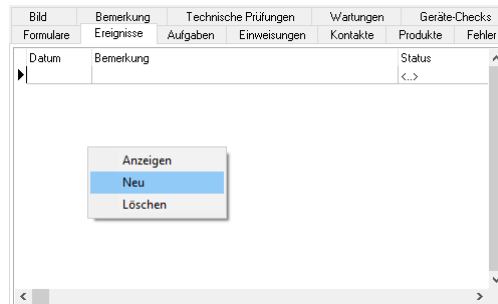


Abbildung 1

Nach einem Mausklick auf *Neu* öffnet sich das Fenster *Ereignis*. Das *Datum* kann über den *Drei-Punkt-Button* direkt angepasst werden, wenn nötig. Die *Beschreibung* des *Ereignisses* erfolgt direkt hierunter.

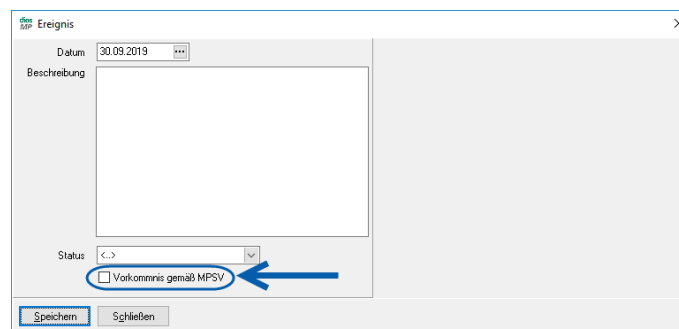


Abbildung 2

Ein *Dokument* wird, wenn erforderlich, aus dem Praxisnetzwerk *importiert* oder über den in den *Optionen* eingerichteten Dokumentenscanner *hinzugefügt*. Jedes *Ereignis* kann durch Aktivierung des unten mit einem Pfeil markierten Kästchens als *Vorkommnis* gekennzeichnet werden.

Laut MPG wird bei Geräten unterschieden zwischen EReignissen und Vorkommnissen. Vorkommnisse lt. § 29 MPG sind

jede Funktionsstörung, jeder Ausfall oder jede Änderung der Merkmale oder der Leistung eines Medizinproduktes sowie jede Unsachgemäßheit der Kennzeichnung oder Gebrauchsanweisung, die direkt oder indirekt zum Tod oder zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes eines Patienten oder eines Anwenders oder einer anderen Person geführt haben oder hätten führen können,

jeden Grund technischer oder medizinischer Art, der auf Grund der in Nummer 1 genannten Ursachen durch die Merkmale und die Leistungen eines Medizinproduktes bedingt ist und zum systematischen Rückruf von Medizinprodukten desselben Typs durch den Hersteller geführt. hat.

Jedes *Ereignis* kann mit einem *Status* versehen werden:

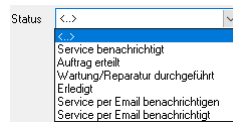


Abbildung 3

Das Unterregister *Ereignisse* listet anschließend alle gespeicherten Daten. Wurde ein *Ereignis* als *Vorkommnis* deklariert, wird es hier in roter Schriftfarbe dargestellt.

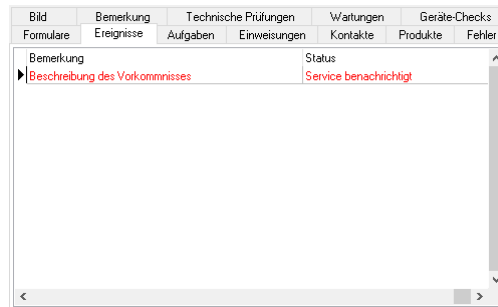


Abbildung 4